


# CANE BUDDY

The Portable, Lightweight Cane with Built-in Lights!

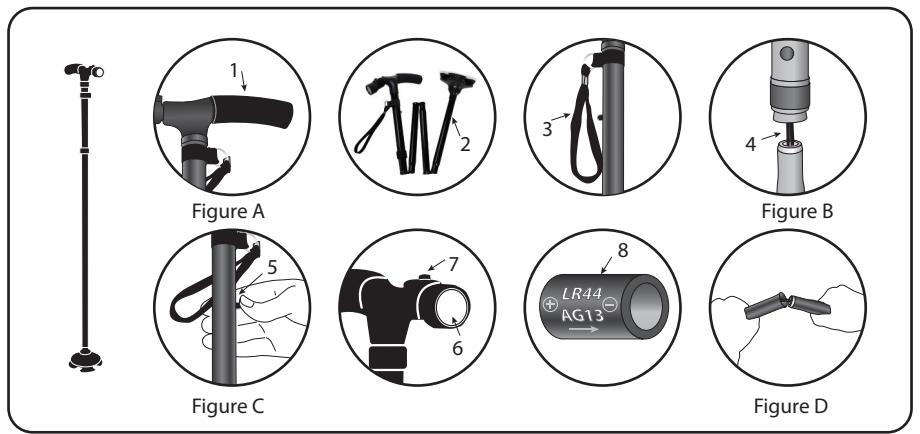

## English

### Product Description

1. Handle
2. Cane Sections
3. Wrist Strap
4. Elastic cord
5. Length adjustment button
6. Light
7. Light Switch
8. Battery compartment

### Instructions for use

#### Unfolding Cane Buddy

Cane Buddy™ has a wrist strap that keeps the sections of the cane together when the cane is folded up. To unfold the cane, first unfasten the wrist strap (3). Grasp the handle (1), hold it up and let the sections of the cane (2) unfold by the force of gravity.

**Important:** To prevent falls, always ensure that all of the cane sections (2) are perfectly aligned and locked in place (see Figure B). Before using the cane for support, make sure that the sections are perfectly aligned and the cane is stiff.

**CAUTION** Uncontrolled release of the elastic cord (4) inside the cane can cause severe injury to unprotected body parts, particularly the eyes. If the elastic cord (4) breaks, becomes damaged or wears out, stop using the product. Do not stretch the elastic cord (4) more than is necessary to unfold or fold up the cane (2).

#### Adjusting the Length of Cane Buddy™

Cane Buddy™ has five different length settings. To make it longer, hold down the length adjustment button (5) as shown in Figure C, pull up on the handle and release the adjustment button to let it lock into a lower slot. To make the cane shorter, hold down the length adjustment button (5), push down on the handle and release the adjustment button to let it lock into a higher slot. Carefully adjust the cane's length to suit your needs.

**CAUTION** To prevent falls, always ensure that all of the cane sections (2) and the length adjustment button are perfectly aligned and locked into place.

#### Using the Light on Cane Buddy™

An adjustable light (6) is located at the end of the handle (1). To turn the light on and off, press the light switch (7) on the cane handle (1). The light pivots up and down so you can point it in the direction you wish.

#### Folding up Cane Buddy™

To store the cane, separate the sections as shown in Figure D and group them together. Once you have separated and gathered all the sections, fasten them with the wrist strap (3). Secure the sections with the fasteners at the each end of the strap.

#### Inserting and Changing the Batteries

Cane Buddy™ operates with 4pcs LR44 batteries. To insert the batteries, unscrew the light (6), pull the tab to remove the battery compartment (8) and insert the batteries. Make sure that the battery poles correspond to the markings on the compartment. Put the battery compartment back in place (6). Make sure the light is secure and working. If it is not, repeat the process and make sure that all of the parts fit perfectly together.

#### Safety Warnings

- Read the instruction manual before using Cane Buddy™ for the first time.
- Always consult your doctor before using Cane Buddy™
- The product is not intended for use in icy or slippery conditions.
- The product is not intended for use by persons weighing over 250 lbs / 115kg.
- Do not disassemble the body of the cane, which contains the elastic cord.
- The product is not for medical use.
- Not suitable for skiing.
- Use areas: asphalt and forest paths. Never use the cane on wet, slippery surfaces.
- This product does not aim to be a walking aid as per EN 1985 (on hiking sticks.)
- Do not use the cane if it is defective.

## Français

### Description du produit

1. Poignée
2. Segments de la canne
3. Courroie
4. Corde élastique
5. Bouton de réglage de l'hauteur
6. Voyant lumineux
7. Interrupteur de lumière
8. Conteneur piles

### Mode d'emploi

#### Pour déployer la canne Cane Buddy™

Cane Buddy™ comporte une courroie permettant d'attacher et de fixer la canne lorsqu'elle est pliée. Pour la déplier, commencez par détacher la courroie (3). Tenez la poignée (1) et laissez les segments pliables (2) se déplier seuls vers le sol.

**Important** Pour prévenir les chutes, assurez-vous que les segments de la canne (2) sont parfaitement placés et bloqués à leur place (voir la figure B). Avant de vous appuyer sur la canne, assurez-vous que les segments sont à leur place et que la canne est complètement rigide.

**ATTENTION** La libération non contrôlée de la corde élastique (4) à l'intérieur peut entraîner des lésions graves sur les parties du corps non protégées, en particulier les yeux. Si la corde élastique (4) se casse ou si elle est abîmée ou usée, cessez de vous servir de la canne. Ne tirez pas plus que nécessaire sur la corde élastique (4) pour démonter ou monter les segments de la canne (2).

#### Réglage de l'hauteur de Cane Buddy™

Cane Buddy™ comporte 5 hauteurs différentes. Pour l'allonger, appuyez sur le bouton de réglage de l'hauteur (5), comme indiqué sur la figure C, puis tirez vers le haut et placez le bouton de réglage de l'hauteur dans un orifice inférieur afin d'allonger la canne. Pour réduire sa taille, appuyez sur le bouton de réglage de l'hauteur (5), puis poussez vers le bas en plaçant le bouton de réglage de l'hauteur dans un orifice supérieur. Réglez correctement l'hauteur en fonction de vos besoins.

**ATTENTION** Pour éviter les chutes, assurez-vous que tous les segments de la canne (2) sont parfaitement placés et bloqués et que le bouton de réglage de la longueur (5) est à sa place.

#### Utilisation du voyant de Cane Buddy™

Le bout du manche (1) comporte un voyant lumineux réglable en hauteur (6). Pour allumer et éteindre la lumière, appuyez sur l'interrupteur du voyant (7) situé sur le manche de la canne (1). En appuyant vers le bas ou vers le haut, vous pouvez placer la lumière à la hauteur souhaitée.

#### Pliage de Cane Buddy™

Pour plier la canne, séparez chaque segment pliable, comme indiqué sur la figure D, puis repliez-les. Après avoir séparé et plié tous les segments, fixez-les au moyen de la courroie (3). Il y a un bouton de fixation à chaque extrémité de la courroie.

#### Mise en place et remplacement des piles

Cane Buddy™ fonctionne avec quatre LR44 piles. Pour les insérer, dévissez le voyant lumineux (6), retirez le conteneur de piles (8) en tirant sur sa languette et placez les piles à l'intérieur en respectant la polarité indiquée sur le conteneur. Remplacez ce dernier dans la canne, puis revissez le voyant lumineux (6). Vérifiez que le voyant est bien fixé et que la lumière s'allume. Dans le cas contraire, recommencez l'opération en emboîtant bien toutes les parties.

#### Avertissements de sécurité

- Avant d'utiliser Cane Buddy™, lisez attentivement le manuel d'instructions.
- Avant d'utiliser Cane Buddy™ pour la première fois, consultez votre médecin.
- Ne pas se servir de la canne sur des surfaces gelées ou glissantes.
- Le poids maximum admis est de 115kg / 250 lbs.
- Ne pas démonter le corps de la canne, car elle contient une corde élastique à l'intérieur.
- Ce produit n'a pas été conçu pour un usage médical.
- Ne convient pas pour faire du ski.
- Sols possibles: asphalt et chemins forestiers. Ne pas se servir du bâton sur des sols mouillés et glissants.
- Ce produit n'a pas pour objectif d'être une aide pour marcher selon la norme EN 1985 (relative aux bâtons de randonnée).
- Ne vous servez pas du bâton s'il est défectueux.

**Remove battery protector before use**

**Retirer le protecteur de piles avant l'utilisation**